



サンプル品
ご依頼OK

サーフェス仕上げ

明るい視界を確保

くっきりとしたシャープな像

価格と使いやすさの両立を実現

デンタルミラー



フロント サーフェスミラー

各12個入/箱

原寸大
サイズ



3P (Φ20mm)



4P (Φ22mm)



5P (Φ24mm)



名南歯科貿易株式会社

※ 商品を装着しているミラーホルダー(角)は別売です。
装着している商品詳細は裏面下部にご覧いただけます。

明るいサーフェスマirrorでゴーストが出ない

表面反射タイプなのでゴーストがしっかりと抑えられ、診療時にくっきりとシャープな像で歯面を提供。使用者に正確な情報を与えます。

また、ミラー面も明るいいため、照度の限られた口腔内での診療クオリティを落としません。



一般的なミラー
ゴーストが発生



フロントサーフェスマirror
そのままの映像で鏡視可能


分かりやすいパッケージデザインを採用

両側面にサイズが表記されているため、箱を積み重ねてもミラーのサイズをすぐに認識できます。



上面

両側面

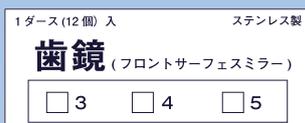

国内規格のホルダーで使用可能!

人気の番手をラインナップ

日本人の口腔内の大きさに合わせた3つのサイズをラインナップ。

3P (Φ20mm)

大きく開口できないお年寄りやお子様の診療で取り回しやすいサイズです。

4P (Φ22mm)

国内で多く使用されており、通常の診療で一番扱いやすい、標準的なサイズです。

5P (Φ24mm)

複数の歯や歯列全体の状況を確認したいときや、視界の一貫性を保ちたい際に便利なサイズです。

仕様及び滅菌情報

材質	ステンレス
コーティング	クロム
オートクレーブ	131℃ / 60~70分 (最大 131℃)
乾燥温度	121℃
煮沸温度	95℃~97℃
推奨薬品	アルコール
入数	12個入(箱)

一般的名称: 歯鏡 一般医療機器届出番号: 23B2X10023000393

ラインナップ

フロントサーフェスマirror 3P 12個入 Φ20mm

フロントサーフェスマirror 4P 12個入 Φ22mm

フロントサーフェスマirror 5P 12個入 Φ24mm

各 4,980円(税別)

関連商品

スリムネック両面ミラー



片面ミラーと同じ使い心地で両面鏡視

鏡面仕上げのため、ゴーストを発生させずに歯牙をくっきりとしたシャープな像で視認できます。

これまでは頬を牽引した際に、患者様へ大きな負担が掛かっていました。本商品では高い操作性で牽引や圧排を低減できるため、大きく開口できない年配者やお子様の診療時に効果的です。

3P (Φ20mm) 6個入 ¥6,280円(税別)

4P (Φ22mm) 6個入 ¥6,280円(税別)

販売名: スリムネック両面ミラー 一般的名称: 歯鏡
一般医療機器届出番号: 23B2X10023000420

ミラーホルダー角(5本入)



国産で握りやすい、約10gの角型ハンドル。
オートクレーブ(135~140℃)対応です。

販売名: ミラーホルダー 一般的名称: 歯鏡
一般医療機器届出番号: 13B3X00117000021

¥1,800円(税別)

製造販売元

名南歯科貿易株式会社

本社: 〒454-0805 愛知県名古屋市中川区舟戸町2番26号

TEL: (052) 799-4075 FAX: (052) 353-6610

東京オフィス: 〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2 理工図書ビル2F

& ショールーム TEL: (03) 6261-3523 FAX: (03) 6261-3524



YouTube

取扱店

Meinan
名南歯科貿易株式会社