

マルチ800

Multi 800

思うままに操作する、ニータイプの技工用ブラシレスマイクロモーター



膝で操作する
“ニータイプ”
Knee Type

Point1

スペースを有効活用できる、ニータイプ

機器を足元に設置し、デスク上の作業スペースを確保。ワークフローで発生するフットペダルを探すストレスを徹底的に削減する、膝で押すニータイプモデルです。



- ✓ 疲れにくい
- ✓ 操作性
- ✓ 時短

Point2

高トルクでブラシレス

最大7.6Ncmの高トルクで技工作業を徹底的にサポート。また、ブラシレスなためカーボンブラシが交換不要で、加えて高い耐久性も両立しています。

ハンドピース SDE-BS50C

- ・最高回転数 50,000rpm ・最大トルク 7.6Ncm
- ・寸法 L160×Φ27mm ・重量 215g (コード含まず) ・コード長 1.5m



本体 MULTI-800

一般的名称：歯科技工用モーター
一般医療機器届出番号：23B2X10023000424

サイズ(W×D×Hmm)	112.5×237×218 mm
重量	2.80kg (ハンドピース、コード含まず)
電源	100-120 V 50/60Hz

■セット内容

ハンドピース、ハンドピーススタンド
電源コード、取り付けブラケット/ナット・ボルト
取り付け用台紙

標準価格

160,000円(税別)

Point3

誰でも簡単な設置方法

穴開け用の台紙が同梱されており、名南ラボベンチに加え、すでに導入している技工机にも取り付けが可能です。

※ 机の仕様や形状によっては、一部取り付けが出来ないタイプもございます。

MULTI-800



オートクルーズ 機能搭載

同じ位置で押し込みを"2秒間"
キープすると、ひざコントローラー
を離しても任意の回転数で
自動的に回転し続けます。

右回転/左回転
対応

ひざ/ハンドモード
切替可能

オートクルーズ
切替可能


オプション品

Option

フットペダル

標準価格

8,000円(税別)

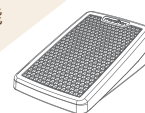

関連 商品

技工机 ラボベンチ

ロングセラーの歯科技工用机です。
安心の初期装備で直ぐにお使いいただけます。

サイズ (W×D×H mm) : 1,210 × 600 × 約 835 mm
棚の高さ (1段) : 約 250mm
電源 : 100V ACアダプター 50/60 Hz
照明 : 1,055 lm 11.9 W
本体カラー : シルバークレー

パネルカラー :

ホワイト イエロー シルバークレー

標準価格 360,000円(税別)

※パキウムモーター別売



ホワイトカラーが増えて3色からお選び頂けます。



歯科技工作業を快適に行える充実の標準装備です。

※ 製品の外観は現物と多少異なる場合がございます。価格・仕様は予告無く変更する場合がございます。

■ 製造販売元

名南歯科貿易株式会社

本社：〒454-0805 愛知県名古屋市中川区舟戸町2番26号

TEL: (052) 799-4075 FAX: (052) 353-6610

東京オフィス：〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2 理工図書ビル2F

& ショールーム TEL: (03) 6261-3523 FAX: (03) 6261-3524



取扱店

